

Sistema de Gestión de datos Audiométricos **SGA**



Disponga de una base de datos simple y sencilla, perfectamente organizada para de todos sus pacientes. Agregue, edite, elimine y busque pacientes fácilmente. Puede tener una o varias bases de datos que pueden almacenarse en el disco rigido de su PC o ser portátiles, dentro de un pendrive



De cada paciente, sus datos personales, antecedentes, historia clínica y todos los estudios audiológicos que se le hayan realizado con notas, profesionales intervinientes y gráficos realizados.



Los estudios pueden mostrarse en gráficos de audiometrías tonales por vía aérea y ósea, logaudiometrías, timpanogramas e impedanciometrías, y cada uno de ellos con sus datos asociados y ordenados por fecha. De esa forma, se pueden comparar resultados para realizar seguimientos o estadísticas, visualizar e imprimir cualesquiera de dichos estudios, exportar los gráficos como imágenes, archivos de texto o base de datos.






El SGA permite la introducción manual (mediante el mouse) del gráfico audiométrico y timpanométrico. Por lo tanto, se puede utilizar con cualquier audiómetro e impedanciómetro.





Conecte su equipo a la PC y capture los datos de los audiómetros LADIE AD-150 / AD-151 en forma *on-line* (en simultáneo con la realización del estudio) a través del módulo opcional LADIE PCL-150), y de los audiómetros LADIE AD-101 / AD-160 directamente, tanto en forma *on line* como *off line* (descarga de memoria posterior al estudio).

Imprima informes completos de los estudios, eligiendo cualesquiera de ellos desde el programa, escoja si desea agregar también los datos del paciente, los antecedentes, la historia clínica, etc. y confeccione un informe personalizado a su gusto con características profesionales para entregar a sus pacientes.

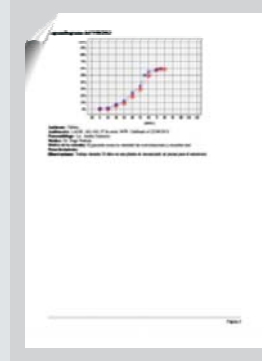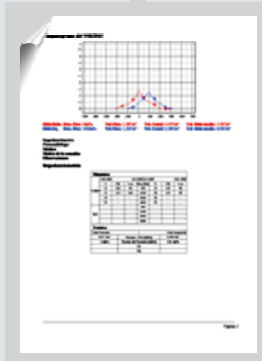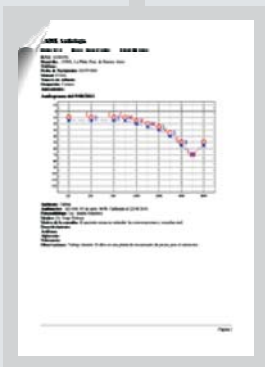

ESPECIFICACIONES

Hardware

Puerto USB disponible para llave de seguridad.
Para conexión con equipos LADIE requiere puerto USB adicional

Sistema Operativo

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

Todos los equipos LADIE tienen garantía escrita por un año. Service, calibración y mantenimiento asegurado.